

BeautiCoat

ビューティコート適用後の注意点

1. 食事について

処置後、3日間は着色性の強い飲食物やタバコはお控えください。

例：コーヒー、紅茶、赤ワイン、カレー等



3日経過後も、着色性の強い飲食物を頻繁に摂取するとコーティング材への着色が起こりやすくなります。また、固い食べ物を食べるとコーティング材の一部が剥がれる場合がありますのでご注意ください。

※軽度の着色や剥がれてであれば、当院にてメインテナンス処置が可能です。

2. 歯みがきについて

通常どおりに歯みがきしていただいて問題ありません。

歯みがき剤もお好きなものをご自由にお使いください。


フロスや歯間ブラシ等を用いた歯間清掃については、コーティング材に接触しないよう注意して行ってください。

one point

歯みがき剤について

ビューティコートのコーティング材にはフッ素が含まれており、フッ素を口腔内や歯質にリリース(放出)①する機能があります。

フッ素含有歯みがき等を使用していただくことで、フッ素をコーティング材にリチャージ(取り込み)②でき、より多くのフッ素をリリース(放出)することが可能となります。

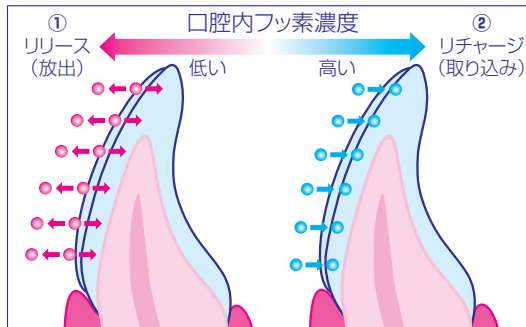

3. 定期検診について

患者様の咬合状態や生活習慣によっては適用期間内にペーストの一部が剥がれたり着色したりする恐れがあります。

状態を確認するためにも定期的に来院するようにしてください。