

お手入れ方法

使用後は、中性洗剤でよく洗って乾燥させ、直射日光を避けた風通しのよい場所で保管してください。
りっぷるとれーなーは消耗品です。製品にひび割れや亀裂、変形や変色などが認められましたら、使用を中止し、新しいものとお取り替えください。

＜煮沸消毒＞ 煮沸消毒するときは、大きめの鍋にたっぷりのお湯を入れ、2～3分間完全に浸した状態で煮沸してください。煮沸消毒を続けると徐々に材質が硬くなるおそれがあります。材質などが硬くなったと感じましたら、新しい物と買い替えていただくことをお勧めします。
＜薬液消毒＞ 薬液消毒には哺乳びん専用の消毒液をご使用ください。詳しくは、消毒用品の取扱説明書に従ってください。

包装



※アソート包装ではありません。

口輪筋トレーニング器具
りっぷるとれーなー
●日本製

【内容】
(りっぷるとれーなー…1、取扱説明書…1)×10入
色調:4色
カラー:オレンジ、イエロー、ピンク、ブルー

●仕様

本体材質	ポリプロピレン
外形寸法	W50×D58.6×H25(mm)
質量	約7g

ご使用前の注意

- 使用前に必ず流水でよく洗ってください。
- 他の人に使いまわさないでください。

■リーフレット



■A3サイズポスター(両面)



片面:おくちポカ〜ン(小児向け)



片面:高齢者向け

- 患者啓発用リーフレット、ポスターもご準備しています。ご入用の際は、歯科商店様にお申し出ください。

関連製品



口唇閉鎖力測定器
りっぷるくん

【内容】
本体(ストラップ付)…1
りっぷるボタン…50
※単四形アルカリ乾電池は付属しておりませんので、別途ご購入をお願いいたします。

別売品

りっぷるボタン(50個入)

●仕様

本体材質	ABS樹脂
電源 / 電圧	単四形アルカリ乾電池2本/DC3V
照明光源	赤色LED(最大出力0.06mW、ピーク波長630nm)
測定対象	口輪筋
外形寸法	W60×D180×H26(mm)
質量	本体128g(乾電池含まず)
使用温湿度範囲	温度0～40℃、湿度30～85%
保存温湿度範囲	温度-10～60℃、湿度10～85%

取扱い店



口輪筋トレーニング器具
りっぷるとれーなー

口輪筋トレーニング器具 りっぷるとれーなー

歯科医師が考えた おくちポカ〜ン予防

口輪筋を中心とした
表情筋を鍛えて、
おくちポカ〜ンや
様々な症状を
予防しましょう。




本カタログに記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。


ご使用の際は取扱説明書をよく読んでお使いください。

お顔の筋肉はすべてつながっています

口輪筋は口の周りを囲むようにある筋肉で、多くの表情筋につながっています。口輪筋や表情筋がゆるんでくると口唇閉鎖不全症につながります。口唇閉鎖不全症は、口呼吸や鼻閉、気道閉塞、いびき、アレルギー疾患などとの関連が示唆されています。幼少期の発達時期から口輪筋を中心とした表情筋をトレーニングし、口唇閉鎖不全症を予防しましょう。

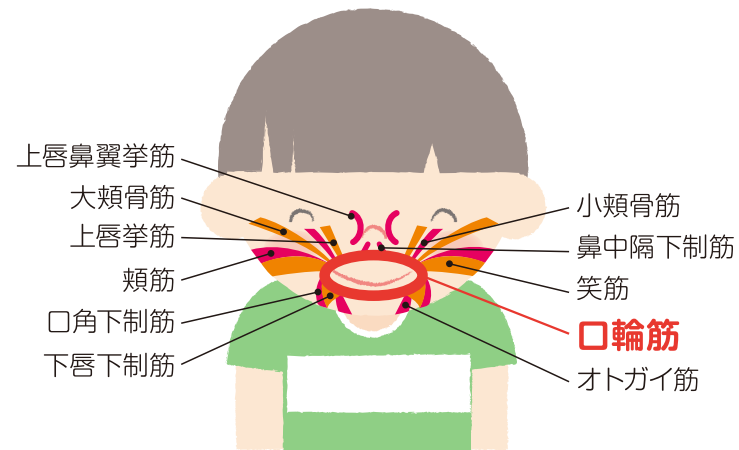


歯科医師が考えた「りっぷるとれーなー」

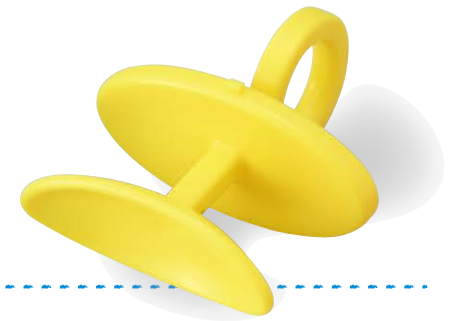

● 歯列に沿うように丸みをつけ、口唇の内側に適度にフィットする設計

歯列に沿うように丸みをつけ、口唇の内側に適度にフィットするよう設計しました。口唇内に入るホルダー部も大きくなっていますので、口輪筋だけでなく周囲の表情筋なども鍛えることができます。

● 小さなお子さまも安全にトレーニングできる誤飲防止ストッパーつき

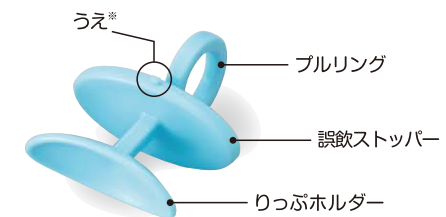

※目印を上にしてご使用ください。

トレーニング方法



このような方法もあります

乳幼児の場合は保護者に引っ張ってもらう。



■ トレーニング方法を掲載しております。是非ご覧ください。



りっぷるとれーなー動画 (RippleTrainer.mp4) の容量が約9MBあります。

口唇閉鎖力の定期的な測定は医療機器「りっぷるくん」

りっぷるくんは測定時の「引っ張る力の方向」に誤差をできるだけ少なくし、「測定開始位置」のバラつきを少なくした測定器です。「りっぷるくん」と「りっぷるとれーなー」を組み合わせることで、トレーニング効果を正確に把握することができます。

● トレーニングの一例です。



トレーニング前の口唇閉鎖力測定



前→左→右位置をかえてトレーニング



トレーニング後の口唇閉鎖力測定

トレーニングが楽しくなるポップな4色カラーをご準備

