

症例やお好みによって使い分けていただけるよう
流動性が異なる2種類をラインナップ

BEAUTIFIL FLOW

F02


低流動タイプ

形態を維持して欲しい部位への使用に適します。

F10

高流動タイプ

凹凸部や狭窄部など、複雑な形状の部位、
薄い層でさまざまなキャラクタライズを
施したい部位への使用に適します。

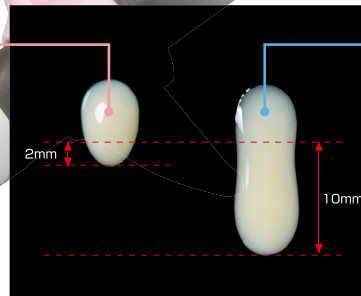

一定体積のビューティフィルフローを採取したガラス板を
垂直に立て、1分後に移動した距離(mm)を測定

症例を選ばない優れた審美性

オリジナル特殊色を使用した症例 G (ガム)

根面う蝕修復 提供：日野浦 光先生
(日野浦歯科医院)



う蝕除去後

F02 G+A3シェードを
充填



エナメル質表面凹凸部
の審美的回復 提供：日野浦 光先生
(日野浦歯科医院)



F10 エナメル質表面に
A3Tシェードを
塗布



動揺歯の固定 提供：猪越 重久先生
(イノコシ歯科医院)



F10 A3シェードを
使用し
動揺歯を固定



用途

充填修復

- 小さな浅い窩洞修復 (I~Ⅲ級およびV級窩洞)
- 根面う蝕修復
- 乳歯充填
- エナメル質欠損部の修復
- ベースおよびライニング
- CR充填後の補足充填・形態修正
- アンダーカットのブロッキング
- 小窩裂溝封鎖

※いずれも歯科用コンポジットレジン接着材(エッチング材、プライマー、ボンディング材等)と組み合わせて使用します。

その他

- CRラミネートベニア
- CR修復面および変色歯の色調改善
- ボーセレン破折の補修
- 前装冠(レジンおよび陶材)破折の補修

ビューティフィル フローはS-PRGフィラーを配合しています

S-PRGフィラーから6種類のイオンリリース

S-PRGフィラーって？

ビューティフィル フローには、松風が独自に開発したバイオアクティブなフィラー“S-PRGフィラー”が含まれています。

6種類のイオンリリースにより以下の特長を有します。


S-PRGフィラーの特性

抗プラーク付着性(学会報告)


日本歯科保存学会にて下記内容が報告されています。

S-PRGフィラー配合コンポジットレジン表面は、だ液と接触することによって、マテリアルフィルム層ができ、これがコンポジットレジン表面への細菌の付着および増殖を抑制し、成熟したプラークを形成しにくくすると報告されています。また、この層はブラッシング等により脱離するものの、再度だ液との接触によって形成され、持続的にプラークの成熟化を抑制するといわれています。


(参考：朝日大学 歯学部歯科保存学分野／
第117から123回日本歯科保存学会報告)

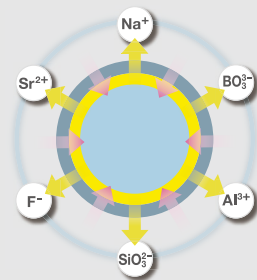

■口腔内におけるプラーク形成状況の観察 (24時間ブラッシング無し)

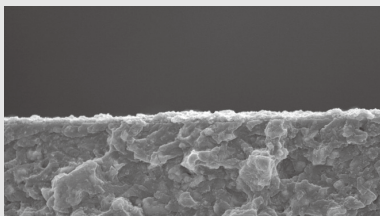

ビューティフィル フロー(S-PRGフィラー配合)
点在化したプラーク形成

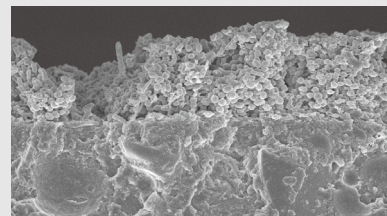

S-PRGフィラー未配合 自社コンポジットレジン
成熟したプラーク形成

包装



※3本入は箱なしの簡易包装です。

ビューティフィル フロー

2g (付属品:ニードルチップ5個付)

2g×3本入※ (F02 A2、A3のみ) (付属品:ニードルチップ25個付)

背景色の影響を受けやすい部位に

歯肉が退縮した
歯頸部修復に

	A1	A2	A3	A3.5	A4	A3O	A3T	G
F02	●	●	●	●	●	●		●
F10	●	●	●	●	●	●	●	

歯質表面凹凸部の
平坦化に

販売名・一般名称

販売名	一般名称	承認・認証・届出番号
ビューティフィル フロー	歯科充填用コンポジットレジン	管理医療機器 医療機器承認番号 21600BZZ00147000

関連製品



管理医療機器 認証番号 229AFBZX00047000
歯科充填用コンポジットレジン

ビューティフィル フロー プラス X **F00** **F03**
2.2g
2.2g×3本入※ (A2、A3のみ)
【色調】**F00** 1色、**F03** 12色

※3本入は箱なしの簡易包装です。



管理医療機器 認証番号 302AKBZX00026000
歯科用象牙質接着材

ビューティボンド Xtreme
セット
トリプルパック

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

取扱店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福祇上高松町11 お客様サポート窓口(075) 778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp
●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595