




歯科技工用溶接ろう付器

マイウエルダー「KTH-MWDX」

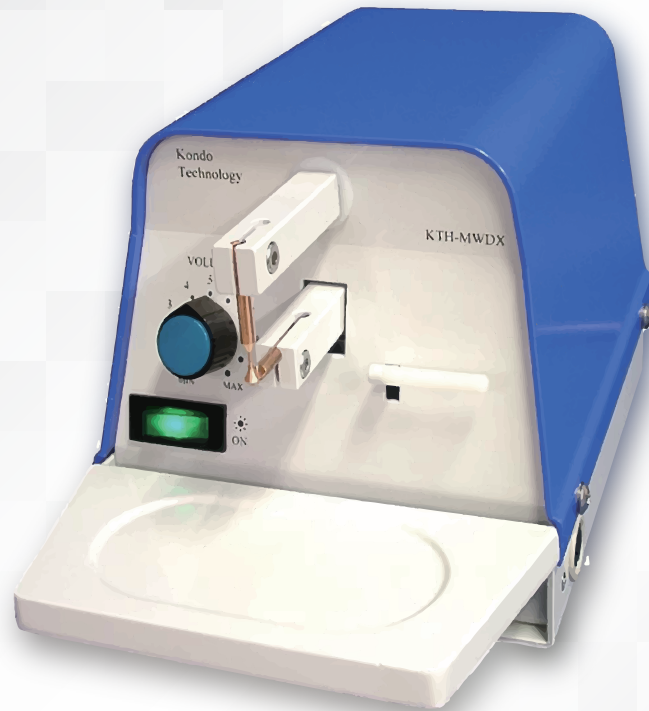

S I M P L E,
E A S Y,
C O M P A C T.

SHOFU INC.

マイウェルダー KTH-MWDX

溶接・仮着に機能を集中し、使いやすさにこだわったシンプル操作のスポットウェルダー。
歯科技工物や矯正装置等の作成に便利な器具です。

溶接ヘッド

垂直方向に開閉する電極
安定した構造で、安全に
しっかりとした溶接を実現

Blue Type

加工スイッチ

小指で押せる軽さで
ワイドなパータイプ
材料を保持したまま
スイッチングが容易に行えます

セットプレート

広くオープンな空間
軽く押し下げる操作で下電極を開閉
テーブルと下電極の動きを連動させることで
作業性と溶接性の両立を実現

Pink Type

オプション製品 ※オプション製品が無くても、本体のみで作業可能です。

- ①ハンディーピンセット
電極を本体外部に取り出して作業可能になります。ピンセット感覚でのバンドとチューブの溶接や、模型上でロウ付け前の仮着作業等が可能です。
- ②フットスイッチ
ハンドフリーな作業が可能になります。
- ③窓付きセットプレート
トレーを着脱できるプレートです。トレーを取り外すと、材料をセットするスペースを広くできます。トレーを装着すると、材料の置き場所として利用できます。

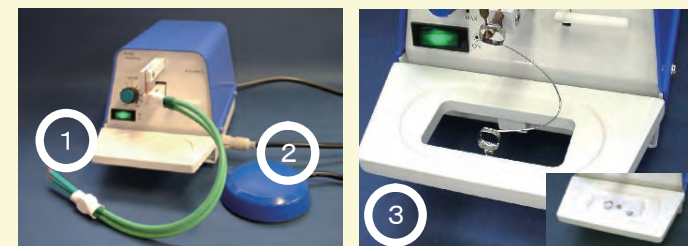


写真	商品名	商品番号
1	マイウェルダー「KTH-MWDX」本体 色調:ブルー	SW200
2	マイウェルダー「KTH-MWDX」本体* 色調:ピンク	SW200P
3	フットスイッチ	SW101
4	ハンディーピンセット	SW102
5	交換用電極(上下セット)	SW103
6	窓付きプレート*	SW202

※受注発注製品

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
マイウェルダー「KTH-MWDX」	歯科技工用溶接ろう付器	一般医療機器 医療機器届出番号: 13B3X1019000001

仕様/使用電源	AC100V 50 / 60Hz
外形寸法	W154 × D255 × H147mm
質量	4.5kg

商品に関するお問い合わせは、株式会社 松風 営業部矯正課までお願いいたします。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風 営業部矯正課

〒113-0034 東京都文京区湯島3-16-2 松風ESTビル TEL:03-3832-1824 FAX:03-3832-7682

<http://www.shofu.co.jp>