



松風技工用カーバイドバー
ジブスカーバHP

ジブスカーバHP

石こう・レジン用
カーバイドバー

逆刃(左カット)が負担を軽減!

石こうやレジンの切削に適した技工用カーバイドバーです。
通常の技工用カーバイドバーとは逆の“左カット”を採用し、
『術者の負担軽減』、『使用中、ハンドピースからバーが抜け出さない』
という特長を付与しました。
4枚刃、6枚刃、8枚刃を取り揃え、大量削除から気泡除去、コンタクト調整まで
幅広い用途にご使用いただけます。





Four blades
Six blades
Eight blades



手にもハンドピースにもやさしい

刃の目立てが、“左カット”になっているため、使用中に
バーが抜け出すことなく、ハンドピースおよび術者の手
への負担を軽減します。

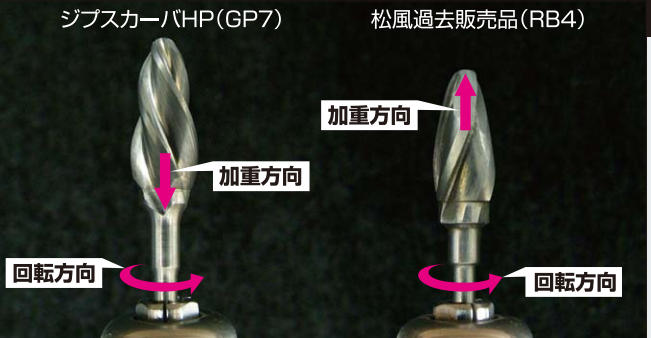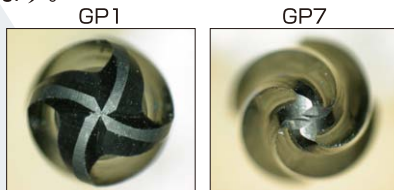

▼ 使用例 [石こうやレジンの切削に] ※金属、陶材の切削には使用しないで下さい。



GP1

GP7W

GP14F


GP14F

SHOFU INC.

ストレスフリーの切削感

Four blades
Six blades
Eight blades
GP

切削効率が高い“プレーンカット”を採用。石こうが湿った状態でも目詰まりしにくく、ストレスを感じることなく切削していただけます。

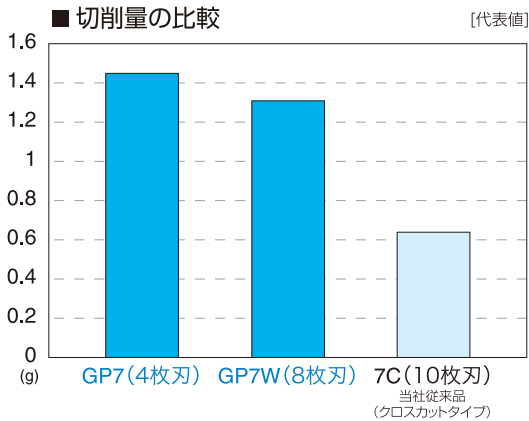

■ 目詰まり比較テスト(湿式)



GP1 GP7 7C 8C
当社従来品(クロスカットタイプ)

※バーに付着した水分は必ず拭き取ってください。

<測定条件> 被切削体:超硬質石こう(自社基準)「モデロックII」 回転速度:10,000min⁻¹ 切削時間:30秒

包装



松風技工用カーバイドバー
ジブスカーバHP
石こう用カーバイドバー

【包装】

各1本
<形態>5種: GP1、GP7、GP1W、GP7W、GP14F
<最高許容回転速度>
20,000 min⁻¹
<推奨回転速度>
5,000~15,000 min⁻¹

販売名・一般の名称

販売名	一般の名称	承認・認証・届出番号
松風技工用カーバイドバー	歯科技工用カーバイド切削器具	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000134

	形態図	刃数	対象	主な用途
GP1		4枚刃	超硬質石こう 湿った石こう	大量削除
GP7				
GP1W		8枚刃	硬質石こう 普通石こう 各種レジン	削除+調整 (滑沢な面性状) <small>※GP14Fはチェアサイドでのレジンの調整にも適しています。</small>
GP7W				
GP14F				

関連製品



歯科用硬質石こう
キャプストーンDF
●色調 / 3色: イエロー、グレー、ブルー
●包装
18kg
エコパック3kg(1.5kg×2)



歯科用硬質石こう(タイプ3:超硬質石こう)
松風モデロックII
●色調 / 1色
●包装
18kg
エコパック3kg(1.5kg×2)



歯科用硬質石こう(タイプ3:超硬質石こう)
モデルストーン
●色調 / 2色: ホワイト、ピーチカラー
●包装
18kg
エコパック3kg(1.5kg×2)



歯科技工用電動式ハンドピース
ラボギアXL セット
●包装
各一式
種類:2種(スタンダードセット、ハイトルクセット)

取扱い店

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。