



ポーセレン焼成用トレー  
ダークトレー

ワイヤーピン  
ダブルピン

蓄熱性の高いトレーのため  
焼成物の先端部と歯頸部の温度差が少なく、  
歯頸部のヒケやポンティック基底面の焼きムラを抑制します。  
また、支持ピンは耐久性の高い材質のため、  
変形後も繰り返し使用できます。  
ポストへの食い込みの心配が少ないので、特に、  
オールセラミックスポーセレンに有効です。




トレーと支持ピンの併用で  
ヒケや焼きムラを抑制。

焼成後の収縮時に生じる  
ポストへの食い込みの心配  
が少ないワイヤー状のピン。

焼成物の  
形状にあわせて変形  
させ支持します。

for example

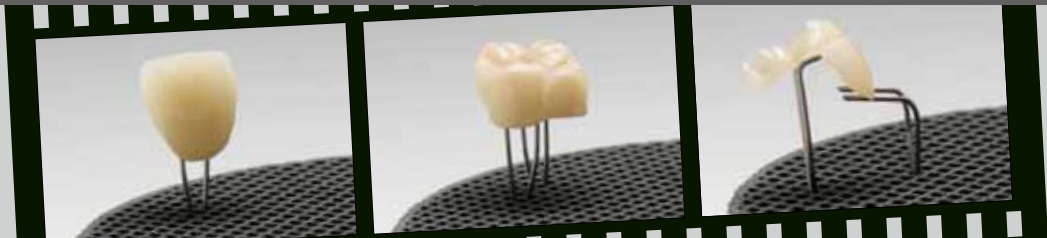

前歯：1本で植立

臼歯：2本で植立

インレー：先端を変形加工して植立

【仕様・包装・価格】



ダークトレー

1個  
寸法 φ68×H10mm・メッシュピッチ 1.4mm  
成分：炭化ケイ素 99%  
最高使用温度：1200℃

ご使用の際は取扱説明書等をよく読んでお使いください。



ダブルピン

10本  
形状：ポスト部15mm(脚部8mm)  
全長23mm  
太さ φ0.5mm 変形可能  
成分：カンタル合金  
最高使用温度：1200℃

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社：〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社：東京(03)3832-4366 ●営業所：札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>