



プレス成形&ポーセレン焼成用ファーンネス
エステマツトプレス

Esthemat Press

Press & porcelain firing furnace

プレス成形とポーセレン焼成の

“二刀流”

プレス成形&ポーセレン焼成用ファーンネス
エステマツトプレス



SHOFU INC.

Esthemat Press

エステマツ プレス

「エステマツ プレス」はプレス成形とポーセレン焼成の両方が可能なファーンレスです。ボディーをスリムにしながら、大型カラー液晶パネルを採用しており、扱いやすい設計です。また、弊社陶材「ヴァンテージ」シリーズの築盛用陶材、セラミックスインゴットのプログラムや、プレス成形用のニッケイ酸リチウムのプログラムが予め設定されているため、初めての方でもすぐにお使いいただけます。

5.7インチの大型カラー液晶パネル




見やすく押しやすい操作パネル

シリンダーが動かなくなると自動終了するPF*機能を搭載

焼き付きが生じる材料にも安心してご使用いただけます。

*PF=Press Function

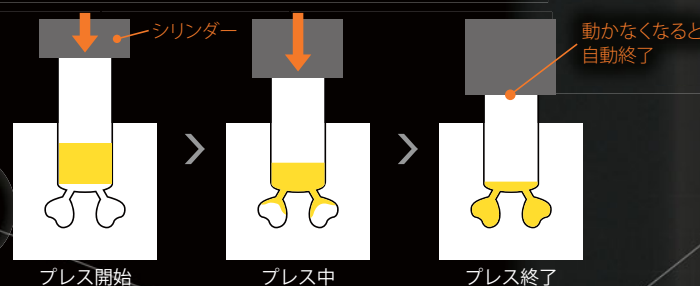

スリムで奥行きをとらない設計

無駄を省き、設置場所を選ばない省スタイルを実現 (W282 × D375 × H635)

多くの種類のプレス成形用インゴットに対応

「エステマツ プレス」では12mm、13mmの2種類のプランジャーを用意しており、多くの種類のインゴットに対応しています。

12mm

13mm

すぐに使える便利なプリセットプログラム

弊社「ヴァンテージ」シリーズの築盛用陶材、セラミックスインゴットの各種プログラムや、プレス成形用のニッケイ酸リチウムのプレスプログラムが予めセットされているので、設置直後からお使いいただけます。


また、予めセットされたプログラムを変更したり、ユーザー独自のプログラムを新規に設定したりすることも可能です。

※プリセットプログラムは代表的なプログラムです。ご使用される埋没材やインゴットの種類により微調整していただく必要があります。

松風のプレスシステム

プレス専用の埋没材や、各種セラミックスインゴットを用意しております。

〈セラミックスインゴット〉

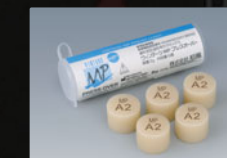

メタルフレーム用
ヴァンテージ MP
プレスオーバー



ジルコニアフレーム用
ヴァンテージ ZR
プレスオーバー

〈プレス専用埋没材〉



セラベティプレス&キャスト



0mm

282mm

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
エステマツ プレス	歯科技工用セラミックス加熱加圧成形器	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000242

包装・価格



エステマツ プレス 一式


【内容】

本体、ゴムリング100* 1、
 ゴムリング200* 1、
 プランジャーベース100(12mm)* 1、
 プランジャーベース200(12mm)* 1、
 プランジャーベース100(13mm)* 1、
 プランジャーベース200(13mm)* 1、
 フラットゲージ100* 1、
 フラットゲージ200* 1、
 アルミナプランジャー(12mm)* 1、
 アルミナプランジャー(13mm)* 1、
 エアーチューブ* 1、プレス台* 1、
 焼成台* 1、ステージ昇降用ドライバー 1、
 ピンセット 1、電源コード* 1、
 真空ホース(ホースバンド付) 1、
 真空ポンプ接続アダプタ* 1、
 15Aヒューズ 3、5Aヒューズ 1、
 ポーセレンファーンレス用丸トレー* 1、
 ポーセレントレーセット* 1

*印は部品販売があります。

【仕様】

形名	SEM-P
使用温湿度範囲	5~40℃、湿度80%以下
電源電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	1.1kVA(真空ポンプ含まず)
使用最高温度	1180℃
マッフル内有効寸法	φ95×65(mm)
プログラム数	250
外形寸法	W282×D375×H635(mm)

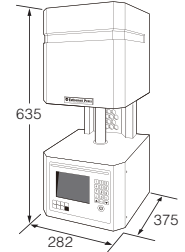

質量	20kg
----	------



〈別売品〉
真空ポンプ100 一台

【内容】
オイルレスタイプの真空ポンプです。

関連製品



歯科加圧成形用セラミックス
ヴィンテージ MP
プレスオーバー

5個入(2gインゴット)



歯科加圧成形用セラミックス
ヴィンテージ ZR
プレスオーバー

10個入(2gインゴット)
30個入(2gインゴット)



プレスセラミックス用りん酸塩系埋没材
セラベティ プレス&キャスト

粉 3kg(100g×30袋)
12kg(100g×120袋)
液 300mL
2L



歯科メタルセラミックス修復用陶材
ヴィンテージ MP
スタンダードセット

セット



歯科用陶材(シリコニアフレーム用)
ヴィンテージ ZR ABセット

セット



歯科用陶材(アルミナコーピング用)
ヴィンテージ AL ABセット

セット



歯科セラミックス用着色材料(ポーセレンステイン)
ヴィンテージ アート
ベーシックカラーセット

セット(全17色)

このカタログに記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
このカタログに記載の価格は2013年11月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

http://www.shofu.co.jp