



# ORIGAMI SL

.020 Square



# ORIGAMI SL

.020 Square

-Passive Self-Ligating System-

.020×.020 スクエアスロット

パッシブセルフライゲーションシステム



## 開発コンセプト・特長



ラビアルブラケットで、効率的な治療と患者さんの快適性を両立するブラケットを作りたいたと考え、この ORIGAMI SL を開発しました。

この製品は、製品名の由来である折り紙（正方形）と共通するスクエア（正方形）型ブラケットスロットを有していることが特徴となります。

スクエア型スロットは、ワイヤーとの遊びを少なくし、コントロールしやすい環境を作ります。スロットの縦横サイズが同一になることで、ラウンドワイヤーでも縦横共に遊びが少ない状況を作れることが特徴となります。

また、患者さんの快適性と Light Continuous Force でのコントロールを考え、小さく、ブラケットハイトの低いセルフライゲーションブラケットにデザインしました。

この .020 Square のコンセプトが世界に広がっていくことを願っています。



開発者  
イーライン矯正歯科  
院長 竹元京人先生

### Esthetic

Small, Low profile




ORIGAMI SL

GENIUS SYSTEM  
Self-Ligating System

\*自社製品比較

### .020 Square

Light Force.  
Tipping & Rotation control

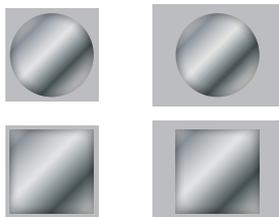


.020×.020 Slot

.022×.028 Slot

### Passive

Low friction. Less binding

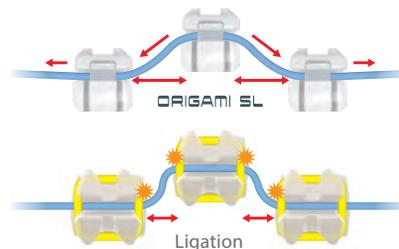

Ligation

## パッシブセルフライゲーションブラケット

4つの面でワイヤーを効率的にコントロール

結さつ可能な  
タイウィングスペース



.020×.020 スロット

ブラケットスロットとワイヤーの  
遊びが少なくなることで、Tipping, Torque,  
Rotation control を行いやすい

簡便なオープン/クローズ機構  
結さつ不要なためケアタイムの削減、  
患者さまの負担を軽減



対合歯に当たりづらいデザイン

小さい形状のため  
対合歯に当たりづらい位置に  
ポジショニングしやすい

## Setup、インダイレクトボンディング化することでより効率的な診療を。



Setup



Positioning



Indirect Bonding

ORIGAMI SL ブラケット、ORIGAMI SL チューブはアンギュレーションが0° のため、Setup 模型にポジショニングをし、  
インダイレクトボンディングコアで位置づけることで、ストレートワイヤーの特長を活かした治療が行えます。<sup>※1</sup>

※注1：詳細は営業担当者へお問い合わせください。

ORIGAMI SL ブラケット	包装	
	単品	10入

(社内処理コード：KN04)



■単品

品番	トルク	アンギュレーション	IDカラー
KT5110	10°	0°	●
KT5120	5°	0°	●
KT5130	0°	0°	なし
KT5140	-5°	0°	●
KT5150	-10°	0°	●

品番	KT5110	KT5120	KT5130	KT5140	KT5150
IDマーク					
TQ	+10°	+5°	0°	-5°	-10°
ANG	0°	0°	0°	0°	0°

ORIGAMI SL チューブ	包装	
	単品	10入

(社内処理コード：KMO4)



第一大臼歯用チューブ 第二大臼歯用チューブ

■単品

品番	部位	トルク	アンギュレーション	IDカラー
KT5160	U6R/L6L	-15°	0°	●
KT5260	U6L/L6R	-15°	0°	●
KT5170	U7R/L7L	-15°	0°	●
KT5270	U7L/L7R	-15°	0°	●

■1症例キット

内容	品番
1症例キット 上下左右6-7 (8入)	KTUL67

1症例キット内容

-15°	-15°	TQ	-15°	-15°
7 6 R L 6 7				
-15°	-15°	TQ	-15°	-15°

※ご注意：全てティップ0°、インアウトは同一値です。  
チューブのIDマークが歯肉側にくるよう位置付けてください。ご使用の際はご注意ください。

ブラケットオープニングドライバー (歯科矯正用結さつ器)



ジニアシステム/ORIGAMIシステム共用

BD32001

ブラケットオープニングドライバー

包装

1入

(社内処理コード：KMO9)

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ORIGAMI SL ブラケット	歯列矯正用アタッチメント	管理医療機器 医療機器認証番号 304AKBZX00050000
ORIGAMI SL チューブ	歯列矯正用チューブ	管理医療機器 医療機器認証番号 304AKBZX00051000
ブラケットオープニング ドライバー	歯科矯正用結さつ器	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000275

商品に関するお問い合わせは、株式会社 松風 営業部矯正課までお願いいたします。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

矯正に関するお問合せ先  
営業部 矯正課

〒113-0034 東京都文京区湯島3-16-2 松風 ESTビル  
Tel.03-3832-1824 Fax.03-3832-7682

www.shofu.co.jp/ortho/