



歯列矯正用スプリング

イーブンフォース NT クローズドコイルスプリング

EVEN FÖRCE

CLOSED COIL SPRINGS




「安定した矯正力」を発現する

EVEN FORCE

松風のクローズドコイルスプリング

SHOFU INC.

イーブンフォース NT クローズドコイルスプリング (歯列矯正用スプリング)

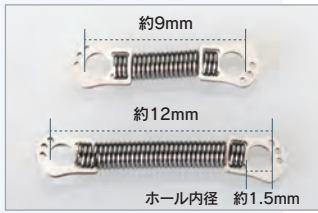

イーブンフォース NT クローズドコイルスプリングは、けん引の長さに関わらずほぼ一定の力を発現し、おだやかで持続的な力をかけられます。

力の大きさは、保持部の先端にあるIDホルルの個数によって簡単に識別できるようになっています。

9mmと12mmの2種類の長さをご選択いただけます。

包装

単品 10入

(社内処理コード: PH02)

1. おだやかで持続的な力を発現




ニッケルチタン合金がもつ超弾性の恒常的な力で、けん引の長さに関わらずほぼ一定の力をかけられます。

2. IDホルルにより種類の識別が可能



保持部先端にあるIDホルルの個数によって、力の大きさが識別できるようになっています。

バネ強さ

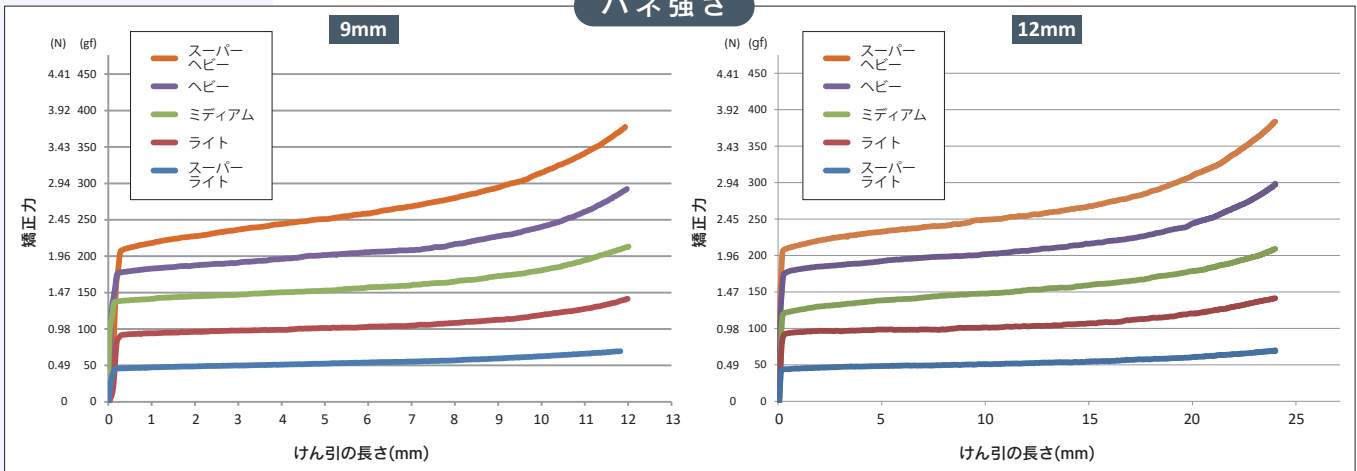

長さ	IDホルル	フォース	ワイヤー直径×コイル内径	矯正力(代表値) N / gf	商品番号	注文数量
9mm		スーパー ライト	.007×.038	0.5N 50gf	T090738	
		ライト	.009×.038	1.0N 100gf	T090938	
		ミディアム	.010×.038	1.5N 150gf	T091038	
		ヘビー	.011×.042	2.0N 200gf	T091142	
		スーパー ヘビー	.012×.042	2.5N 250gf	T091242	
12mm		スーパー ライト	.007×.038	0.5N 50gf	T120738	
		ライト	.009×.038	1.0N 100gf	T120938	
		ミディアム	.010×.038	1.5N 150gf	T121038	
		ヘビー	.011×.042	2.0N 200gf	T121142	
		スーパー ヘビー	.012×.042	2.5N 250gf	T121242	

商品に関するお問い合わせは、株式会社 松風 営業部矯正課までお願いいたします。

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

販売名	一般の名称	承認・認証・届出番号
イーブンフォース NT クローズドコイルスプリング	歯列矯正用スプリング	管理医療機器 医療機器認証番号 307AKBZX00079000

ご注文はFAXにてお願い申し上げます。

FAX送信先: 株式会社 松風 矯正課 03-3832-7682

お得意様名 フリガナ	ご担当者様名 フリガナ	通信欄
ご住所 フリガナ	TEL	
〒	FAX	
E-MAIL		

弊社は、お客様からご提供いただきましたお名前、ご住所、お勤め先、お電話番号、メールアドレス等の個人情報、今後弊社で開催するセミナーのご案内、並びに製品情報やキャンペーン情報、物品の送付、アンケートの実施に利用し、適切に管理いたします。その他、当社における個人情報の取扱いについては、弊社プライバシーポリシーをご確認ください。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

矯正に関するお問合せ先
営業部 矯正課

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-16-2 松風 EST ビル
Tel.03-3832-1824 Fax.03-3832-7682
www.shofu.co.jp