



歯科セラミックス用陶材
ヴァンテージ LD

VINTAGE



7色を 追加発売!

増色により色調再現の幅が広がります


透明性の
調整に

OPAQUE DENTIN



OD-W

オペークデンティン
ホワイト

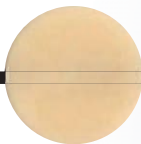

OD-LA

オペークデンティン
ライトAシェード

ホワイトニング
対応

他色と混合することで、
透明性と明るさを調整



特殊色の
追加

OPAL ENAMEL



OPAL 55

オパール
55

ホワイトニング
対応




OPAL MI

オパール
ミルクィー

白歯部の咬頭頂や
白濁部分に使用


ENAMEL EFFECT

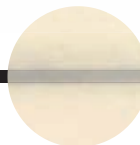

OPAL WB

オパール
ホワイトバンド


辺縁隆線や隣接部や
白帯などに使用

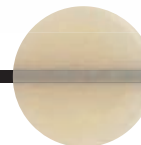

OPAL OC

オパール
オクレーザル

白歯の咬合面
などに使用

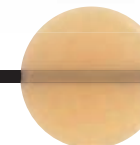

OPAL AM-Y

オパール
アンバーイエロー

黄味がかかったアメ色の
エナメル色を再現

SHOFU INC.

ヴァンテージ LD

ヴァンテージ LDは二ケイ酸リチウムガラスセラミックスおよびジルコニアの上部に築盛する歯科用陶材です。基本色の色調はクラシカルシェードを採用し、その他、特殊色によりさまざまな色調再現が可能です。

二ケイ酸リチウム系材料やジルコニアに適した諸特性

ヴァンテージ LDは二ケイ酸リチウム系材料だけではなく、ジルコニアへの使用に適した諸特性を有しています。

物性値


熱膨張係数(×10 ⁻⁶ K ⁻¹)	ガラス転移温度(°C)	曲げ強さ(MPa)	溶解量(μg/cm ²)
9.0	510	126	5

ISO6872:2015 (Dentistry-ceramic materials) に準拠

透明性の調整に (OD-W、OD-LA)

透明性がより低い2色を増色。他色と混合することで透明性と明るさを調整できます。

コントラスト比

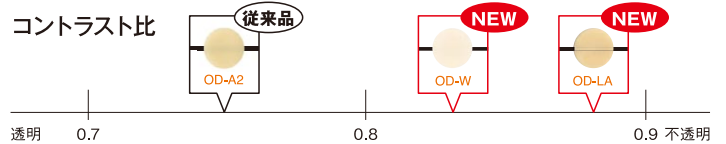

色調構成表

印刷物のため実物とは色調が異なる場合があります。

SHADE	W0	W1	W2	W3	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
OPAQUE DENTIN	-	-	-	OD-A1: OD-N=1:1	OD-A1	OD-A2	OD-A3	OD-A3.5	OD-A4	OD-B2: OD-N=1:1	OD-B2	OD-B2: OD-B4=1:1	OD-B4	OD-C2: OD-N=1:1	OD-C2	OD-C2: OD-C4=1:1	OD-C4	OD-D3: OD-N=2:1	OD-D3	OD-D3: OD-B4=1:1
BODY	-	-	-	W3B	A1B	A2B	A3B	A3.5B	A4B	B1B	B2B	B3B	B4B	C1B	C2B	C3B	C4B	D2B	D3B	D4B
OPAL ENAMEL	OPAL 56	OPAL 56: OPAL 57 =2:1	OPAL 56: OPAL 57 =1:1	OPAL 57	OPAL 58	OPAL 59	OPAL 60	OPAL 57	OPAL 58	OPAL 59	OPAL 60	OPAL 58	OPAL 59	OPAL 60	OPAL 58	OPAL 59	OPAL 60	OPAL 57	OPAL 58	OPAL 59
VINTAGE LD PRESS	-	-	-	T-1	T-2	T-3	T-1	T-2	T-3	T-1	T-2	T-3	T-1	T-3	T-1	T-3	T-1	T-3	T-1	T-3
	MT-W1	MT-W2	MT-W3	MT-A1	MT-A2	MT-A3	MT-A3.5	MT-A4	MT-B1	MT-B2	MT-B3	MT-B4	MT-C1	MT-C2	MT-C3	MT-C4	MT-D2	MT-D3	MT-D4	
	-	-	-	MO-1	MO-2	-	MO-1	MO-2	MO-1	MO-3	-	MO-1	-	MO-1	-	MO-1	-	-	-	
	-	-	-	ADD-ON B	ADD-ON T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

OPAQUE DENTIN	OD-W	OD-N	OD-LA											
OPAL ENAMEL	OPAL 55	OPAL 56	OPAL 57	OPAL 58	OPAL 59	OPAL 60								
ENAMEL EFFECT	OPAL MI	OPAL WB	OPAL OC	OPAL SL	OPAL T	T	T-Glass	BT	PT	GT	YT	QT	OPAL AM-Y	AM-Y
GUM COLOR	GUM-1	GUM-2	GUM-3	GUM-4	GUM-5									
CORRECTION	ADD-ON B	ADD-ON T												

●印が追加発売品 (7色)

販売名・一般的名称

販売元	一般名称	承認・認証・届出番号
ヴァンテージ LD	歯科用陶材	管理医療機器 医療機器認証番号 226AFBZX00103000

種類	包装	色調
ボディ (17色)	15g	A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B1B, B2B, B3B, B4B, C1B, C2B, C3B, C4B, D2B, D3B, D4B, W3B
オパークデンティン (13色)		OD-A1, OD-A2, OD-A3, OD-A3.5, OD-A4, OD-B2, OD-B4, OD-C2, OD-C4, OD-D3, OD-N (OD-ニュートラル), OD-W, OD-LA (OD-ライト A シェード)
エナメル (20色)		OPAL 55, OPAL 56, OPAL 57, OPAL 58, OPAL 59, OPAL 60, OPAL T (トランスルーセント), OPAL SL (スーパールーセント), OPAL MI (ミルキー), OPAL WB (ホワイトバンド), OPAL OC (オクルーザル), OPAL AM-Y (アンパーイエロー), T-Glass (T-ガラス), BT (ブルトランスルーセント), PT (ピンクトランスルーセント), GT (グレートランスルーセント), YT (イエロートランスルーセント), OT (オレンジトランスルーセント), AM-Y (アンパーイエロー), T (トランスルーセント)
ガム色 (5色)		Gum-1, Gum-2, Gum-3, Gum-4, Gum-5
コレクション (修正用) (2色)		ADD-ON B (アドオン B), ADD-ON T (アドオン T)



ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱店