


松風ダイヤモンドポイントHP プロビマスターダイヤ

プロビジョナルレストレーション用クラウン・ブリッジの製作が快適にできるレンズ型のダイヤモンドポイントです。



■使いやすいレンズ型の形状

適切な歯間連結部の形成が容易にできるレンズ型の形状です。
エッジと、表面、裏面を有効に活用できるため、ポイントの取り替えが最小限で済み、作業の効率化につながります。

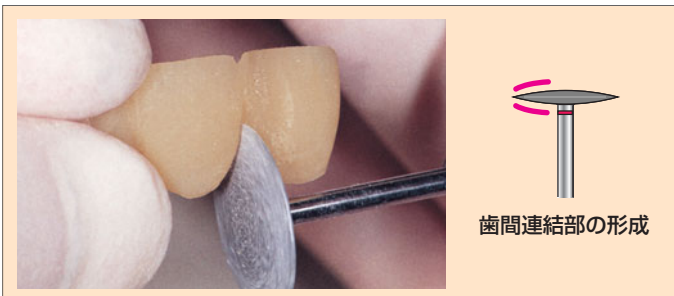


写真提供：渋谷区コアデンタルサトウ 佐藤 友彦 先生

■ダイヤモンドポイントの中で最大※の径（直径16mm）

頭部とシャンクは削り出しによる一体加工で製作しており、軸部が形成の邪魔にならず形状全体を多目的にフル活用できます。

※当社製品内

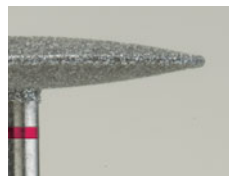

プロビマスターダイヤ




ダイヤモンドディスク

■レジン研削に適切なファイン粒子

常温重合(即重)レジン、硬質レジンおよび各種レジン材料の形態修整に最適です。マージン部もシャープに仕上がります。



一般医療機器 26B1X00004
松風ダイヤモンドポイントHP
プロビマスターダイヤ
多目的ダイヤモンドポイント研削材
【形態】1種：F110PM(Gクラス)
【包装】1本入
【最高許容回転速度】5,000min⁻¹

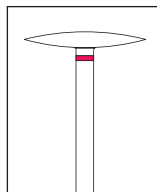

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。