

推奨焼結スケジュール

開始温度	昇温速度	焼成温度	保留時間	降温
室温	5°C/分~10°C/分	1450°C	120分	炉内放冷又は5°C/分~10°C/分

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ディスク ZR ルーセント スープラ	歯科切削加工用セラミックス	管理医療機器 医療機器認証番号 229AGBZX00044A05

包装



松風ディスク ZR ルーセント スープラ

14mm
18mm
22mm

【サイズ】3種類：φ98×14、φ98×18、φ98×22(mm)
【色 調】7色：Plain、W2、A1、A2、A3、A3.5、B1

関連製品

ヴィンテージ アート ユニバーサル



ベーシックセット



グレーズ 15g
GP



ステイン 2g
GP-F



山本リキッド 50mL
専用液 50mL



ヴィンテージ ZR
イントロセット
他各種セット、単品有り



ジルコシャイン
セレクトキット



松風ビトリファイドダイヤ HP
No.28,29,42,43 3本入
No.11 2本入
No.20 3本入
No.10,70 2本入
※CA、FGもあります



ジルコシャイン HP
No.10,11 3本入
No.28 4本入
ホイール5 1枚入
※CAもあります



ジルグロス
20g
40g

ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。

取扱い店



CAD/CAM用高透光性セミシッタージルコニアディスク
松風ディスク ZR ルーセント スープラ



SHOFU DISK ZR Lucent
Supra



Case




写真提供：西山 敦先生 (医療法人 Natural Smile)
枝川 智之先生 (有限会社 バンヤデンタルラボラトリー 代表取締役)



写真提供：野村 聖一先生 (秋葉原総合歯科クリニック院長)
枝川 智之先生 (有限会社 バンヤデンタルラボラトリー 代表取締役)

「ディスク1枚」で幅広い症例に対応可能

「松風ディスク ZR ルーセント スーブラ」は、松風独自のトリプルグラデーション技術により、『強度』×『透光性』×『色調』を機能的にディスク内に配置しました。「ディスク1枚」でインレー、ラミネートベニアからロングスパンブリッジまで幅広い症例に対応可能になりました。

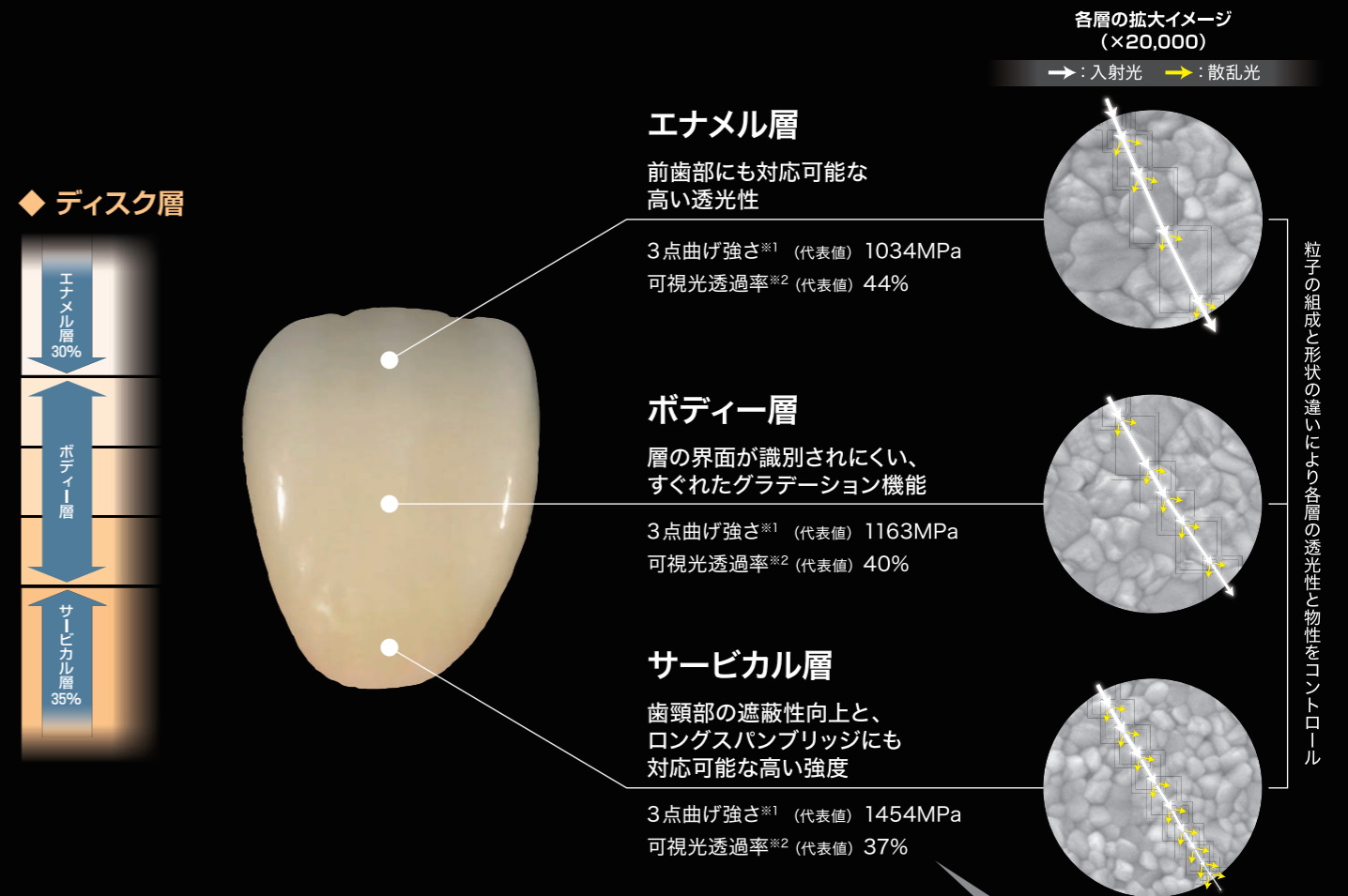


※1 3点曲げ強さ (ISO 6872:2015に準ずる)
※2 可視光透過率 (JIS R 3106:2019に準ずる、色調:A2、試験体厚さ:0.5mm)



優れた色調再現性

- 「松風ディスク ZR ルーセントFA」と同じ『5層マルチレイヤリング構造』を継承しております。
- ステイニングテクニックによりVITAクラシカルシェードを容易に再現可能でありかつ、様々な支台歯にも対応可能な明度設計を採用しております。

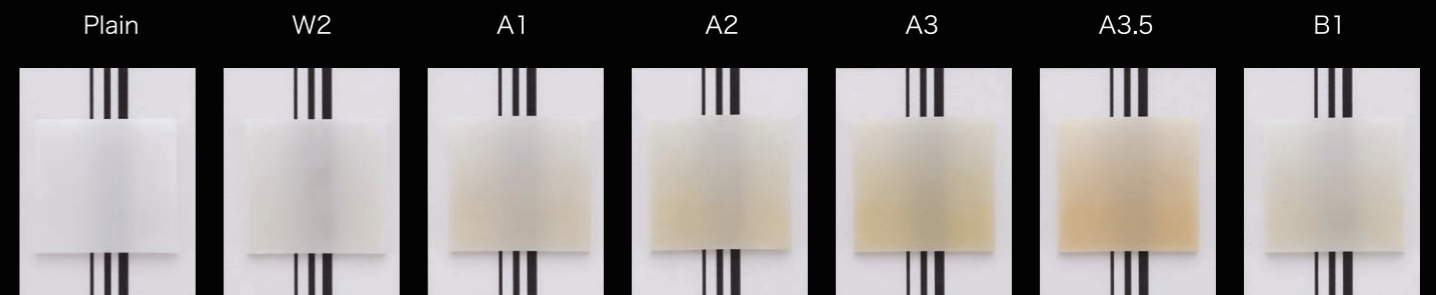

※印刷のため実際の色調とは異なる場合があります。