



多目的洗浄剤
ノイチャージ

素材に優しい洗浄剤

Neucharge

ノイチャージ

イオンの力で
簡単洗浄



組成を見直し
洗浄力アップ!

従来より“ナノコロイドイオン”が
活性化する配合比率に変更し、
洗浄力がUPしました。


すぐれた洗浄力の秘密

「ノイチャージ」は、従来の洗剤のように汚れを化学変化させて取り除くのではなく、帯電した「ナノコロイドイオン」が吸着し、「帯電した汚れ」を浮き上がらせて取り除きます。溶剤を使用していないため、素材にやさしく、様々な場所に安心してお使いいただけます。また、洗浄後はべたつきもなくスッキリとした洗い上がりです。リニューアルにより、「ナノコロイドイオン」がより活性化する配合比率に変更し、従来より洗浄力がアップしました。



使用例

10倍に希釈した液を
スプレーして、拭き取るだけ

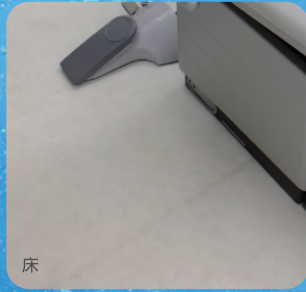

ご使用方法

1. 水道水で約10倍に希釈し、清掃面にスプレー等で塗布してください。
 2. スポンジ、又は乾いた布で、清掃面を拭き取ってください。
- ※ご使用前に、ボトルに記載の[ご使用方法]、[使用上の注意事項]をよくお読みください。
 ※日光に当たると透明に変化する場合がありますが、品質や性能には影響ありません。
 ※長年にわたり積層化・結晶化した汚れに対しては洗浄効果が出にくい場合があります。

成分名

ポリ(オキシエチレン)アルキルエーテル、プロパンジオール、水、ビルダー

使用例

歯科用ユニットの合成皮革の汚れ・流し台まわり(換気扇、レンジ、シンク、蛇口等)・トイレ・洗面台・浴室内(浴槽、床、壁、イス、洗面器等)・陶器・ガラス・アルミサッシ・網戸・家電製品の外まわり(エアコン、冷蔵庫、照明器具、スイッチまわり等)・ステンレス・スチール製品・水拭きできる壁紙・水拭きできる家具・水拭きできる床・プラスチック製品

使用できないもの 水拭きできない素材、水がしみこむ素材(水がしみこみやすい白木や家具、壁紙等)、
コンクリート、表面に特殊な加工がしてあるもの、革製品

※初めて使用する際は、清掃面の目につかないところで脱色等が生じないかテストの上、お使いください。

包装・価格



ノイチャージ
250mL

このカタログに記載の価格は2019年11月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は製品に記載の注意事項をよく読んでお使いください。

取扱い店