

AESCLAP® 滅菌コンテナ・滅菌トレイ製品ラインナップ


滅菌トレイ



滅菌コンテナ



その他

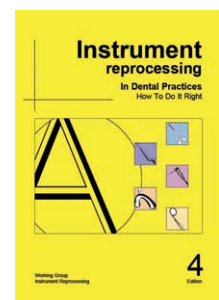

AESCLAP®も主要メンバーに名前を連ねるドイツの外部研究機関であるAKI発行による歯科用インスツルメントの正しい滅菌プロセス情報が得られる黄色カタログ(PDF形式)は、下記のサイトから無料でダウンロードが可能。
<http://www.a-k-i.org/index.php?id=12&tL=1>



ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

取扱店

製造販売元

BRAUN
SHARING EXPERTISE

AESCLAP®
Competence in Dentistry

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16

販売元



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

本社:〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp
支社:東京(03)3832-4366 ● 営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

販売元



松風バイオフィックス株式会社

本社:〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目16-2 TEL.(03)6880-2118 FAX.(03)6880-2488
西日本営業所:〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11 TEL.(075)283-4180 FAX.(075)283-2418 www.shofubiofix.co.jp

2112JEJSi



AESCLAP® Solution for sterilization reprocessing

クリニック・医院でのAESCLAP滅菌コンテナ・滅菌トレイの活用




BRAUN
SHARING EXPERTISE



SHOFU INC.

1つのサイクルで理解する手術用鋼製小物の再生処理

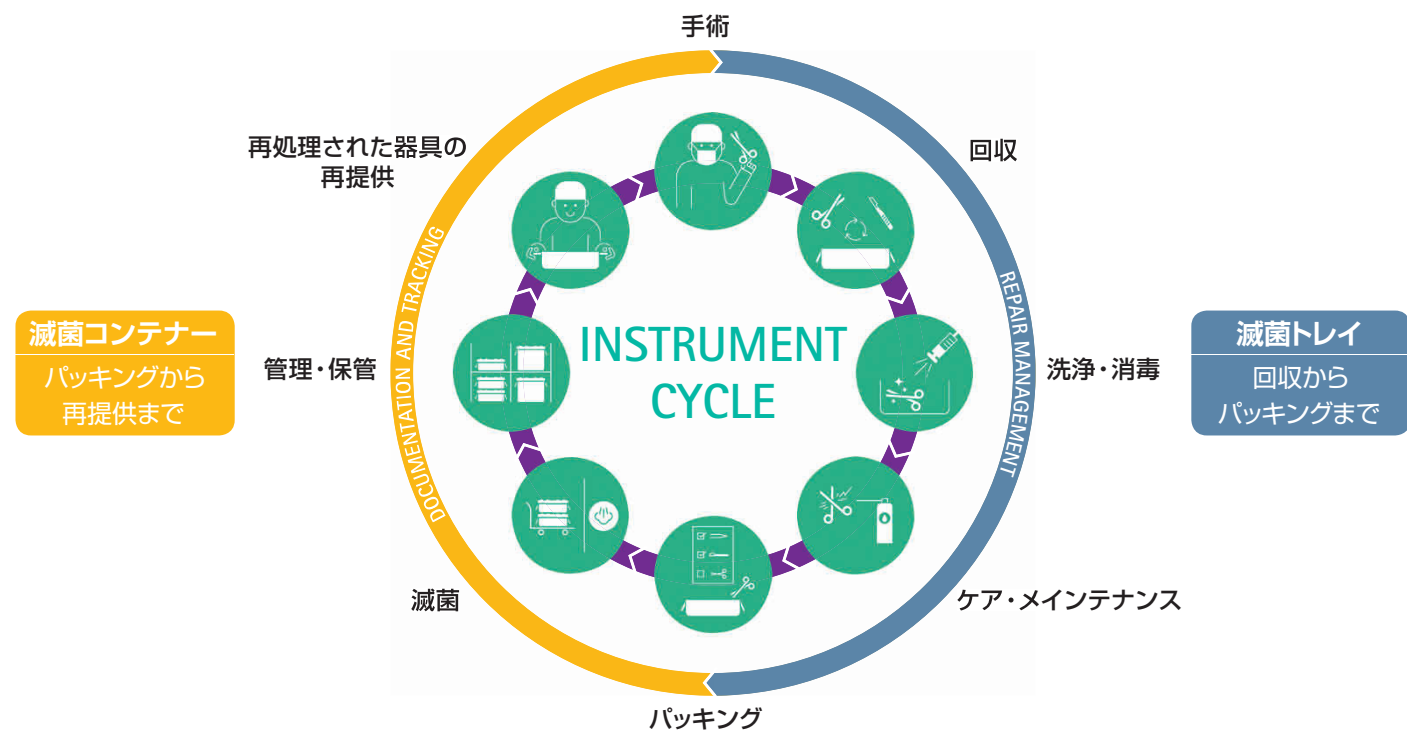

AESCLAP® 滅菌コンテナ・滅菌トレイの特長

滅菌コンテナ

AESCLAP®コンテナは全ての構成部品がDIN EN ISO11607-1,EN868-8等の最新の欧州・国際規格に準拠し一般的な医療用コンテナと同様の高耐久性アルミニウム製で、開閉のハッチは高い気密性と容易な開閉操作の両方を両立しています。著名なロベルト・コッホ研究所(RKI)の推奨する滅菌から再提供までの重要なパートを担います。



リユーザブルフィルター

1,000回の再使用が可能な特殊フィルターで紙フィルターと違い、繊維が崩れ出て滅菌器の吸引口を詰まらせることがありません。



最新版のヨーロッパ規格及び国際規格に準拠

製品のディメンションは上記のDIN EN ISO11607-1,EN868-8等の最新の欧州・国際規格に準拠、設計されており市場に流通しているほとんどの卓上型オートクレーブ滅菌器にジャストフィットします。写真はW&H社最新型オートクレーブ滅菌器での使用例(写真提供W&H社)。



滅菌トレイ

WDで洗浄することを主眼に設計され、洗浄のブラインド(洗い残し)が起きないよう特殊なメッシュ構造を採用、器具提供時も片手で術野へ提供できるようデザインされています。また付属のシリコン製仕切りも自在にカスタマイズ・追加購入が可能。回収からパッキングまで安全で効率よく作業が進むよう医療従事者をサポートします。



インジケーターラベル

滅菌済み・非滅菌が一目で判別可能なインジケーターラベル



滅菌コンテナを使用する7つのメリット

品質の向上

■ 再生処理された器具の正しい再提供が可能になり手術**品質の向上につながります**。滅菌状態が担保された、正しい性能の器具が正しい時に用意されることが最終的なゴールです。

経費削減

■ ディスポの滅菌バッグを使わないので消耗品の**ランニングコストが大幅に軽減**されます。一般的に**約2年**(脚注*下記参照)で**原価償却**という試算が出ており以降医院への経費負担は大幅に軽減されます。

■ 滅菌バッグへのパッキング時間がかからず**人件費の軽減**につながります。滅菌バッグへの挿入・パッキング・シーリングに費やされる時間は**滅菌コンテナの約3倍**(脚注*下記参照)という試算が出ています。

脚注*この数値はAESCLAP®ドイツ本社で現地の製品価格及び現地の人件費をもとに2018年に算出されたものです

安全性の確保

■ 滅菌バッグ内の穿通などの**事故を防止**でき医療従事者・患者の安全性確保につながります。滅菌バッグでは鋭利な器具の穿通事故は防げません。

■ 繊細なマイクロインスツルメントなどの**器具の保護**に役立ちます。高価な器具の破損防止に役立ち、手術パフォーマンスの向上につながると同時に**医院の経費削減にもつながります**。

高効率性

■ **スタックが可能**でラベリングなどにより内容物が容易に確認でき**保管・管理が容易**になります。基本セットや手術用途ごとにセットアップすれば**円滑な器具の運用・管理が実現**します。

■ ディスポの滅菌バッグを医療廃棄せずすみ**地球環境に優しい取り組み**が実現します。オペ毎に大量の医療廃棄物を出していることを忘れていませんか？

