

本製品は光重合器（ソリディライト、アクセルキュア等）の重合室内に
歯冠修復物を安定して配置するための『重合用ポストのセット』と『専用スタンド』です。

当社従来ポスト&ポストスタンド








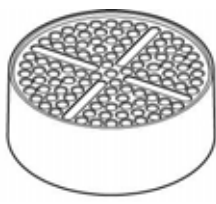
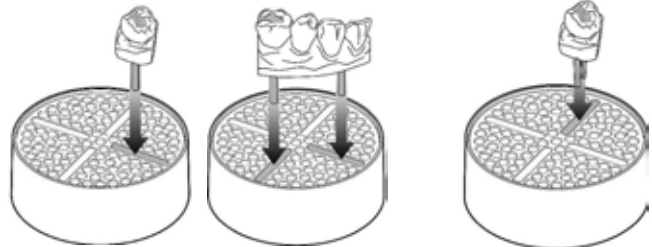
重合物の
安定性が向上！



松風重合用ポスト
& ポストスタンドP



特許出願中

松風重合用ポストセット	松風重合用ポストスタンドP
<p>ポストスタンドPは別売です。</p> <p><u>幅広い用途に対応した5形態</u></p> <p>フリーポスト  お好みの形態に切削してご使用いただけます。 ポストの素材にはガラス繊維が含まれていますので、 技工用カーバイドバーでの切削をおすすめします。 (カーボランダムポイント等の使用は、切削面が荒れ ますので避けてください。)</p> <p>前歯ポストA (円すい状)  主に前歯部コーピング用</p> <p>前歯ポストB (くさび状)  先端形状がくさび状のため、 安定して載せることができます。</p> <p>臼歯ポストA (小白歯用)  小白歯に適しています。</p> <p>臼歯ポストB (大白歯用)  管状になっているため、 ポストコアを差し込むことも可能です。</p>	<p><u>穴数を増やし、使い勝手が向上</u></p> <p> 重合物の大きさに合わせて保持位置が 調節できるため、安定した設置が可能で す。</p> <p><u>ダウエルピン用の溝を付与</u></p> <p> ダウエルピン付模型をポストスタンドP に置くことができます。 ピン間の距離の制約などを受けずに 安定した植立が可能です。</p> <p>ツインピンにも対応！</p>
<p><u>各種技工用光重合器に使用可能</u></p> <p>安定性の高いポスト&ポストスタンドPは、各種技工用光重合器にお使いいただけます。 ポストスタンドPの大きさは 60×高さ23mmです。ポストスタンドP+重合物の大きさが重合可能エリアに入る重合器が対象です。</p>	

【包装・価格】

松風重合用ポストセット

(5種類×各3本:計15本)

松風重合用ポストスタンドP

1個

「ポストセット」、「ポストスタンドP」は組合せてご使用ください。

取扱い店

ご使用の際は使用説明書をよく読んでお使いください。

記載の価格は2007年8月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。