



歯科用3Dプリンター

カーラ プrint 4.0 プロ

carao®

Product Information



NEW

歯科用3Dプリンター

カーラ プrint 4.0 プロ

Giving a hand to oral health.



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

**SHOFU INC.**

100  
since 1922  
2022 SHOFU  
100年先にも輝く笑顔を  
Bright smiles for another 100 years

## cara Print 4.0 Pro

## ▶ 高精度、高速3Dプリンター

カーラ プリント4.0 プロはクルツァー社が開発した歯科専用のインテリジェント3Dプリンターです。一定の速度で積層するのではなく、投影シーケンスと機械の動きを常に計算し造形速度を適切に変化させることで、高精度な造形物の高速積層を実現しました。

## ▶ プラットフォームを50%拡大 (カーラ プリント4.0 との比較)

造形できる面積が増えました。

## ▶ 簡単&amp;スムーズな操作

プリンター表示画面に従って操作するだけなので、初めて操作する方でも簡単に使用することができます。




販売名  
一般的名称  
分 類  
届出番号

カーラ プリント4.0プロ  
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・  
製造ユニット  
一般医療機器  
27B1X00060900029

## テクニカルデータ

3Dプリント技術	デジタルライトプロジェクション (DLP Structured Light)
光源	LED(ピーク波長:385nm)
3Dプリント面積(W×D×H)	124×70×130mm
入力データフォーマット	stl
出力データフォーマット	cpjx
インターフェース	USB 2.0、Wi-Fi、イーサネット
サイズ(W×D×H)	270×420×640mm
重量	21kg
電源入力	100-240VAC、50/60Hz、7.5A最大
電源	GlobTek GTM43004P9016-4.0-T3
プリンタ定格電力	12VDC、7.5A

## 3Dプリンターシステム 関連製品

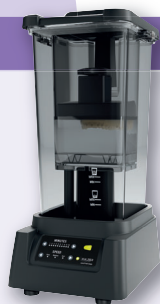

カーラ プリント クリーン  
造形物洗浄器



ハイライトパワー 3D  
光重合器

販売名 カーラプリントクリーン

販売名 ハイライトパワー 3D  
一般的名称 歯科技工用重合装置  
分 類 一般医療機器  
届出番号 27B1X00060900022

本カタログに記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。

取扱い店

製造販売元 **クルツァー ジャパン 株式会社**

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13 TEL.03-5803-2151

www.kulzer.co.jp



世界の歯科医療に貢献する

**株式会社 松風**

●本社：〒605-0983京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp  
●支社：東京(03)3832-4366 ●営業所：札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595