



PMTC用コードレスハンドピース

メルサーージュ プロ ソリッド



PCP (Professional Care for Prophylaxis) 製品

PCPは松風が提唱する、口腔衛生や予防のための概念で、PCP製品はそれらに最適な製品群です。

ヘッドとギアを一体化 (ソリッド) した
PMTC用コードレスハンドピース

メルサーージュ プロ ソリッド

軽く、長時間操作でも疲れにくいコードレスタイプ
口腔内の視野が広がり、
さらに的確なPMTCをサポートします。



Mersage PRO Solid



超コンパクトヘッドで
届きやすさ&操作性UP




SHOFU INC.

※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。

Merssage PRO Solid

超コンパクトヘッドで届きやすさ&操作性UP

患者さまの開口量には限度があります。従来のヘッドよりもさらに細くて長い超コンパクトヘッドにしました。口腔内の視野も広がり作業効率も向上します。

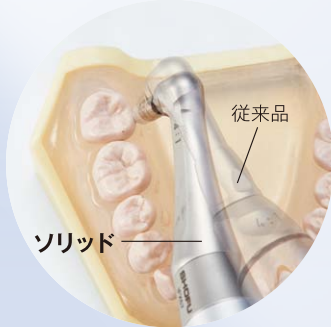

ヘッドへのクリーニングペーストの侵入を防ぐダブルシールド防塵シールを採用。



ヘッドを6ポジションに簡単設定

施術部位に応じて6方向に向きを変えて取り付けることができますので、作業効率が大幅に向上します。



シンプルな操作パネル

操作ボタンはハンドピース上面に設置し、シンプルな操作が可能です。



〈広範囲な速度設定〉

ヘッドを交換することで、500min⁻¹~10,000min⁻¹と幅広く速度設定ができますので、施術目的に応じた使い方が可能です。

ギア比	回転速度 (min ⁻¹)				
1 : 1	2,000	4,000	6,000	8,000	10,000
4 : 1	500	1,000	1,500	2,000	2,500

※2,500min⁻¹以上でご使用される場合は、別売品のヘッドと等速シャフトをお求めください。

包装



PMTC用コードレスハンドピース メルサーージュ プロ ソリッド 一式

【セット内容】
ハンドピース（モーターキャップ付）、
スタンド、
コントラアングルヘッド（1/4ヘッド iFX57）、
ACアダプター、
Fタイプスプレノズル

販売名	メルサーージュ プロ ソリッド
一般的名称	歯科用電動式ハンドピース
承認・認証・届出番号	管理医療機器 医療機器認証番号 226ABBZX00034A01 特定保守管理医療機器

仕様

ハンドピース：定格入力DC3.7V 0.6A、最高回転速度（無負荷時）10,000min⁻¹※1
連続使用時間（満充電時）約1時間※2、充電時間 約1.5時間
寸法 φ25×D139mm、質量 78g
※1：バッテリー残量によって回転速度が変化することがあります。
※2：使用時の負荷によって使用時間が変化することがあります。

スタンド：定格入力5VDC 0.6A、寸法 W80×D105×H37mm、質量120g

ACアダプター：定格入力AC100-240V 0.4-0.2A、定格出力 5VDC 2A、

寸法 W48×D81×H43.3mm、コード長 1.8m、質量140g

コントラアングルヘッド：許容入力回転速度10,000min⁻¹、
無負荷最高回転速度2,500min⁻¹、ギア比4:1減速、質量38g

※基本セットはスクリータイプのみですが、別売のラッチタイプ（ヘッド・シャフト）を購入いただくとCAタイプのラバーカップ等もご使用いただけます。

別売品



メルサーージュプロ ソリッド 1/4-ヘッド (iFX57)	メルサーージュプロ ラッチタイプ-ヘッド (NAC)	メルサーージュプロ 1/4減速シャフト (F4R)	メルサーージュプロ 等速シャフト (FC)	メルサーージュプロ ソリッド スタンド (電源コードなし)	メルサーージュプロ ソリッド ハンドピース (モーターキャップ付)	メルサーージュプロ ソリッド バッテリーバック	メルサーージュプロ ソリッド ACアダプター
--------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------------	------------------------------

取扱い店

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社：〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社：東京(03)3832-4366 ●営業所：札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595
1608GJJSI

<http://www.shofu.co.jp>