



超音波洗浄器

松風ウルトラソニッククリーナー SUC-45

コンパクトでお求めやすい超音波洗浄器

ULTRASONIC CLEANER  
**SUC-45**


洗浄ムラを軽減！  
タンク内を均一に  
洗浄



SHOFU INC.




〈超音波の強度分布〉

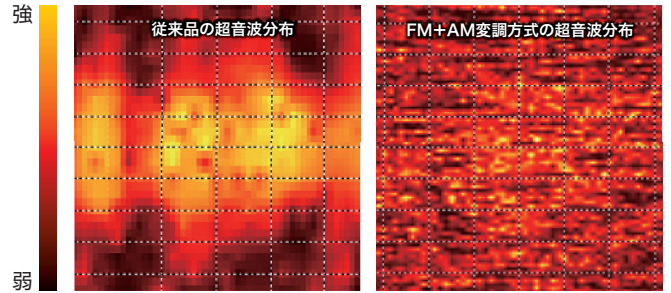

〈イメージ〉

## ■ 洗浄ムラを軽減! タンク内を均一に洗浄

超音波の周波数と振幅を変動させるFM変調およびAM変調方式を新たに採用。これにより、超音波振動が洗浄タンク全体に広がり、ムラ無く効率の良い洗浄が可能になりました。

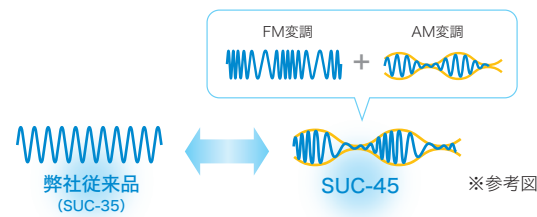

## ● 洗浄能力比較 (アルミ箔粉碎試験 試験条件: 5分)

超音波が強い箇所のアルミ箔が剥離します。

	弊社従来品 (SUC-35)	SUC-45
底から30mmの位置にアルミ箔を入れて洗浄		
底から0mmの位置にアルミ箔を入れて洗浄		

## ■ 環境に配慮した省エネ設計

ピーク出力48W (平均16W) と、SUC-35以上の洗浄力でありながら、消費電力を30W以下に抑えました。(SUC-35の約40%カット)

## ■ 耐久性の向上

洗浄タンク内に局所的に超音波が集中しないため、タンクの劣化が軽減されました。また、内部に水が浸入しにくい設計になっています。

## ■ 包装・価格

松風ウルトラソニッククリーナー SUC-45

コンパクトサイズで  
リーズナブルな  
価格設定



【付属品】ゴム台 1

### ■ 仕様

型 式	SUC-45	高周波出力	平均16W (最大48W)	容 量	約0.4L
電 源	AC100V、50/60Hz	タイマー	5分、10分、15分 (選択式)	外 形 寸 法	幅197×奥行150×高さ149mm
電 源 入 力	30VA	保護回路	温度保護センサー内蔵	質 量	約1.6kg
発振周波数	38.5kHz	洗浄タンク内寸法	Φ98×H55mm		

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ウルトラソニッククリーナー SUC-45	器具除染用洗浄器	一般医療機器 医療機器届出番号 23B2X00029000004

取扱い店

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

本カタログに記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



世界の歯科医療に貢献する

**株式会社 松風**

● 本社: 〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) [www.shofu.co.jp](http://www.shofu.co.jp)  
● 支社: 東京(03)3832-4366 ● 営業所: 札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595